



1. Rengör

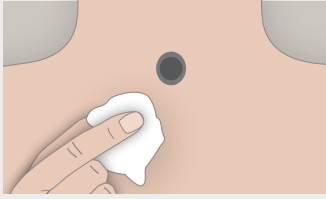

Rengör huden runt din stoma med Provox Cleaning Towel eller med tvål och vatten. Se till att huden är ren och fri från slem, limborttagningsmedel och krämer. Låt det torka. Vid rengöring av huden från rester av lim, förhindra att partiklar/vätskor kommer in i stomat.

Tips vid rengöring: Trimma/raka allt hår runt appliceringsområdet

2. Förbered

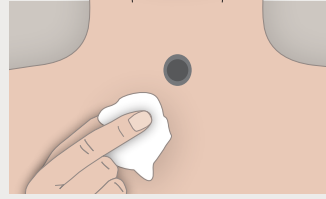


Applicera Provox Skin Barrier och låt det torka. Provox Skin Barrier lämnar ett skyddande lager på din hud.

För Night plåster, använd inte Provox Skin Barrier eller produkter som tvål eller hudkräm som lämnar en oljig rest på huden, eftersom de kan förhindra att Night plåster fastnar ordentligt.


Tips vid förberedelse: Om du behöver starkare fäste, applicera Provox Silicone Glue sparsamt. Silicone Glue kan inte användas med Night plåster!

3. Applicera

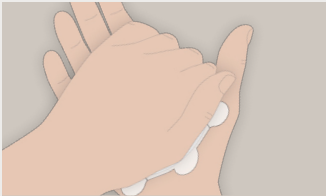


a) Gnugga plåstret mellan händerna för att värma upp det.


Gäller ej Night plåstret

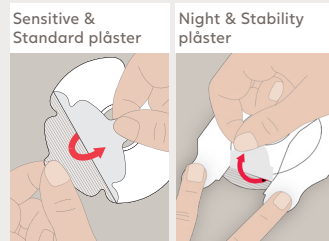

b) Ta bort skyddspappret. För Night and Stability plåster, börja med att ta bort mittpappret och ta sedan bort sidopappren när mittendelen är på huden.

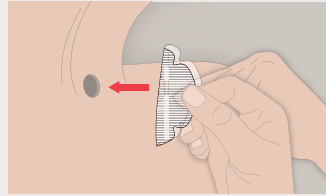

c) Applicera plåsterringen så nära öppningen av ditt stoma som möjligt. Håll nacken i ett neutralt läge och dra eller sträck inte i plåstret.

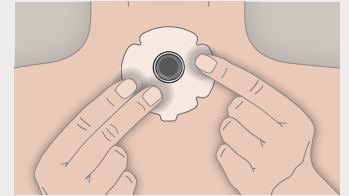


d) Massera försiktigt plåstret på huden. Börja från ditt stoma och massera försiktigt utåt. Massera slutligen hela plåstret.

Tips vid applicering:

- Undvik hål och rynkor som kan låta slem tränga in mellan plåstret och huden, vilket orsakar luftfickor

- Tala inte för tidigt efter applicering av plåstret; låt plåstret fästa sig i ca 15 minuter innan tal om möjligt.
- Rör inte det klibbiga limskiktet när du applicerar det på halsen, eftersom det kommer att minska den totala vidhäftningen.

4. Ta bort

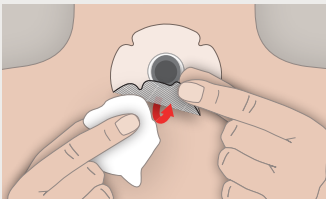

Börja vid fingerfliken och ta långsamt och försiktigt bort plåstret i en låg vinkel medan du stödjer huden. För Standard- och Stability plåster applicerar du först Provox Adhesive Remover ovanpå plåstret. Lyft sedan försiktigt på fingerfliken och påför mer under plåstret.

Ta bort Night plåster med hjälp av en våt duk. Se till att inget vatten droppar in i ditt stoma.



Tips vid borttagning: Använd Provox Adhesive Remover för enkel borttagning.

Tips och tricks för en lufttät tätning

- Försök att inte tala för högt eller med för mycket kraft
- Ta bort HME:n från plåstret när du börjar hosta
- Håll alltid plåstret på plats med 2 fingrar när du tar bort HME:n
- När du har hostat, ta försiktigt bort slemmet och låt inte slemmet tränga in under plåstret

Hur man minimerar hudirritation

- Undvik upprepade plåsterbyten, prata med din läkare om du byter plåster flera gånger under dagen
- Låt inte plåster sitta på för länge. Skapa en bytesrutin som optimerar en säker tätning under en hel dag vilket möjliggör planerade plåsterbyten vid en bekväm och hygienisk plats.

Provox Life Sensitive plåster

Sensitive plåster är ett hudvänligt plåster för alla patienter. Det har god förmåga att sluta tätt.




Provox Life Night plåster

Night plåster är ett lugnande och bekvämt plåster för patienter med irriterad eller skadad hud.



Provox Life Standard plåster

Standard plåster är ett starkt och flexibelt plåster för patienter med frisk hud.

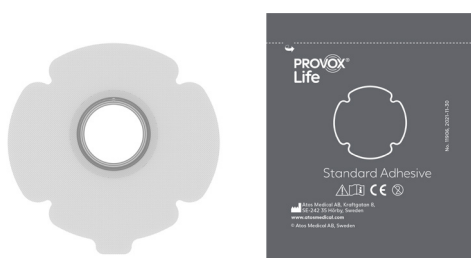





Rekommenderas inte efter operation.

Provox Life Stability plåster

Stability plåster ger ett fast stöd för patienter som talar ofta, har djup stoma eller talar handsfree.



Rekommenderas inte efter operation.

	Beskrivning
	Provox® Cleaning Towel För att rengöra huden innan du sätter på ett plåster
	Provox® Skin Barrier För att lämna ett skyddande lager på huden
	Provox® Adhesive Remover För att hjälpa till att ta bort limmet
	Provox® Silicone Glue Förbättrar vidhäftningen mellan huden och limmet

Huvudkontor:

Atos Medical AB
Hyllie Boulevard 17
215 32 Malmö, Sverige
Tel: +46 (0) 415 198 00
Email: info@atosmedical.com

Tillverkare::

Atos Medical AB
Kraftgatan 8
242 35 Hörby, Sverige

Läs alltid bruksanvisningen innan du börjar använda någon av produkterna. För bruksanvisningar, vänligen besök www.atosmedical.se.

© Coloplast A/S. All rights reserved. Atos and the Atos Medical logo are trademarks of Coloplast A/S.